

产品手册

H_IL33 Reporter 293 Cell Line (old version)

H_IL33 Reporter 293 细胞系（旧版本）

For research use only!

本品仅供科研使用，严禁用于治疗！

版本号：V2.12.3

目录

一、	产品基本信息及组分.....	3
二、	包装、运输及储存.....	3
三、	产品描述.....	4
四、	材料准备.....	5
1.	细胞培养、冻存、复苏试剂准备.....	5
2.	试剂耗材准备.....	5
五、	细胞复苏、传代、冻存.....	6
1.	细胞复苏.....	6
2.	细胞传代（以 10 cm 皿为例）.....	6
3.	细胞冻存.....	6
六、	使用方法（示例）.....	7
1.	激活验证实验.....	7
1)	加样步骤.....	7
2)	报告基因检测.....	8
3)	验证结果.....	8
2.	Block 抗体抑制实验——Anti-IL33.....	9
1)	加样步骤.....	9
2)	报告基因检测.....	10
3)	验证结果.....	11
附录 1:	蛋白激活验证.....	12
附录 2:	稳定性验证.....	12
相关产品	13
使用许可协议:	13

一、 产品基本信息及组分

基本信息

产品编号	产品名称	规格
GM-C12812	H_IL33 Reporter 293 Cell Line (old version)	5E6 Cells/mL

组成成分

产品编号	产品名称	规格	数量	储存
GM-C12812	H_IL33 Reporter 293 Cell Line (old version)	5E6 Cells/mL	1 管	-196°C

二、 包装、运输及储存

1. 细胞系产品干冰运输，-196°C 以下（冰箱或液氮的气相）长期储存。
2. 接触产品请带手套。请收到产品立即确认产品是否为冻存状态，-196°C 以下（冰箱或液氮的气相）长期储存。
3. 本产品相关 Assay，应在二级生物安全实验室或生物安全柜中进行。

三、 产品描述

白细胞介素 33 (IL-33) 是 IL-1 超家族成员中的细胞因子；在上皮细胞、平滑肌细胞，巨噬细胞、成纤维细胞中表达。IL-33 与受体 ST2 (也称为 IL1RL1) 和 IL-1 受体辅助蛋白 (IL1RAP) 相互作用； IL-33 受体在 T 细胞 (特别是 Th2 样细胞)、巨噬细胞、嗜碱性粒细胞、NK 细胞中表达；全长 IL-33 定位于细胞核，与染色质结合来充当转录因子。综上所述，IL-33 在放大粘膜和全身免疫反应中起重要作用，可为哮喘、自身免疫性疾病等提供治疗空间。

吉满生物 H_IL33 Reporter 293 Cell Line (old version) 报告基因细胞系。IL-33 结合 ST2 和 IL1RAcP 亚基组成的异源二聚体受体复合物，然后激活下游信号通路，从而激活荧光素酶 (Luciferase) 的表达， Luciferase 读值即代表信号通路的激活效果。因此可用于 IL-33 相关药物的体外效果评价。

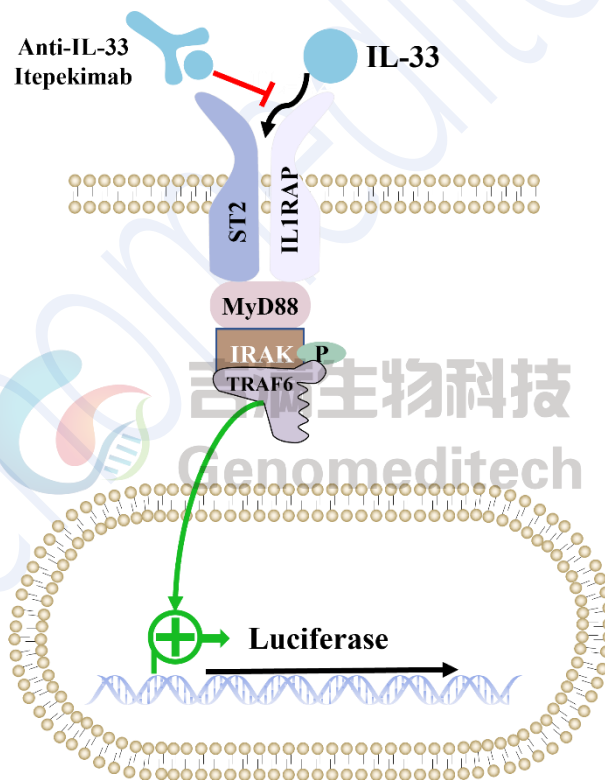


Fig 1.原理示意图

四、 材料准备

1. 细胞培养、冻存、复苏试剂准备

细胞复苏培养基:	EMEM+10% FBS+1% P.S
细胞生长培养基:	EMEM+10% FBS+1% P.S+3 $\mu\text{g}/\text{mL}$ Blasticidin+400 $\mu\text{g}/\text{mL}$ G418+1.5 $\mu\text{g}/\text{mL}$ Puromycin
细胞冻存液:	90% FBS+10% DMSO
Assay Buffer:	EMEM+1% FBS+1% P.S

2. 试剂耗材准备

试剂准备

Reagent	Specification	Manufacturer/Catalogue No.
Blasticidin	10 mg	Genomeditech/GM-040404-1
Puromycin	25 mg	Genomeditech/ GM-040401-1
G418	1 g	Genomeditech/GM-040402-1
Pen/Strep	100 mL	Thermo/15140-122
Fetal Bovine Serum	500 mL	ExCell/FSP500
EMEM	500 mL	ATCC/30-2003
96 Well Clear V-Bottom Tissue Culture	96-well	Corning/3894
96 well round well culture plate	96-well	NEST/701001
96 well White Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate	96-well	Corning/3912
GMOne-Step 2.0 Luciferase Reporter Gene Assay Kit	1000T	Genomeditech/GM-040513C
Human IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein	/	R&D/3625-IL-010
Anti-IL33 hIgG4 Antibody	/	Genomeditech/GM-31628AB
Human IL-33 Protein; His Tag	/	Genomeditech/GM-88001RP

重要仪器

Equipment	Manufacturer/Catalogue No.
细胞计数仪	ThermoFisher Scientific/Countess 3
酶标仪	Moleculardevices/SpectraMax L

五、 细胞复苏、传代、冻存

1. 细胞复苏

- 37°C水浴锅预热复苏培养基，加入预热后的复苏培养基 5 mL 至 15 mL 离心管。
- 从液氮中取出冻存细胞并迅速放入 37°C恒温水浴锅，将细胞液面浸至水面以下轻轻摇动解冻，直到刚刚融化（通常 2-3 分钟）。
- 用 70%乙醇擦拭冻存管外部以降低污染的几率。在生物安全柜或超净台中将冻存管中的细胞悬液转移到步骤 a) 的离心管中，轻轻混匀， $176 \times g$ ，离心 3 min，使细胞沉淀，弃上清。
- 使用 1 mL 复苏培养基重悬，可取出部分使用台盼蓝染色计数活细胞活细胞 $\geq 3 \times 10^6$ cells/mL。
- 通过补加复苏培养基的形式，调整活细胞密度到 $3-4 \times 10^5$ cells/mL，根据细胞悬液总体积，将细胞接种到合适的培养皿中。

3. 细胞冻存

- 使用 $176 \times g$ ，3 min 离心收集细胞。
- 使用预冷细胞冻存液（90% FBS + 10% DMSO）重悬细胞，细胞密度调整为 5×10^6 cells/mL，每管 1 mL 分装到细胞冻存管中。
- 拧紧盖子，适当标记后，将冻存管置于梯度降温盒中，-80°C下保存至少 1 天，尽快转移至液氮中。

2. 细胞传代（以 10 cm 皿为例）

注：细胞复苏后的 1 至 2 代，使用复苏培养基，待细胞状态稳定后，再更换为含有抗生素的生长培养基。

- 细胞为上皮细胞，贴壁生长。
- 培养箱中孵育 16-24 h 后，镜下观察细胞贴壁情况，当细胞密度大于 80%，即可进行细胞传代。两次传代后复苏培养基可调整为添加抗生素的生长培养基。推荐细胞传代比例为 1:3-1:4，2-3 天传代。
- 将皿或培养瓶中的培养液弃去，10 cm 皿加 2 mL PBS 润洗 1 次。
- 弃 PBS，加 1 mL 0.25% Trypsin-EDTA 消化液，37°C 消化 30-60 s，显微镜下观察。
- 待细胞变圆，细胞间隙明显，部分细胞刚开始脱离瓶壁时，加 2 mL 左右生长培养基混匀终止消化，将细胞小心吹打下来， $176 \times g$ 室温离心 3 min。
- 弃上清，细胞沉淀用生长培养基重悬，根据传代前细胞密度分盘（根据培养皿面积和细胞密度计算，传代后细胞密度为 30-40%）。

注意事项：

- 细胞刚复苏时，死细胞较多，贴壁不明显属于正常情况，2-3 天可以恢复贴壁，传代 2-3 次后贴壁细胞比例升高，细胞正常展开。
- 每次传代后会有 5-10%死细胞，但随着代次升高，细胞恢复速度变快，死细胞比例降低，细胞生长速度会趋于稳定。
- 细胞复苏后及每次观察时建议保留细胞照片，可用于辅助判断细胞状态，在出现异常时及时与吉满销售沟通。

六、 使用方法（示例）

1. 激活验证实验

操作步骤可调整优化，对于本实验，推荐 H_IL33 Reporter 293 Cell Line (old version) 细胞量为 1.5×10^4 cells/孔。本次实验使用 Human IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein (18 kDa; 以下简称 Human IL-33) 作为阳性药物，Conc.01 浓度为 1.1 $\mu\text{g/mL}$ ，6 倍梯度稀释，Conc.01-Conc.09 分别排布在 B2-B10，B11 为 0 浓度对照。周围孔加入 100 μL PBS，以防止边孔蒸发。

孔板排布如下：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS
B	Human IL-33	1.1 $\mu\text{g/mL}$	183.33 ng/mL	30.56 ng/mL	5.09 ng/mL	848.77 pg/mL	141.46 pg/mL	23.58 pg/mL	3.93 pg/mL	654.91 fg/mL	0	PBS
C	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS
D												
E												
F												
G												
H												

1) 加样步骤

- 在实验前 16-24 h，将细胞从培养瓶中取出，消化离心收集细胞沉淀，使用适量完全培养基重悬细胞，检测细胞活力并计数，再以完全培养基调整细胞浓度为 1.5×10^5 cells/mL。以排枪加 100 μL 细胞/孔至中间孔。周围的孔加 100 μL PBS。盖上市板盖，于孵箱中孵育过夜使用。
- 使用 1 个无菌 96 孔 V 底板准备药物稀释。
- 每个待测药物，使用一行（如 B2-B10）。
- 准备母液

药物名称	储液	母液	配置方法
Human IL-33	100 $\mu\text{g/mL}$	/	直接使用储液

- 96 孔 V 底板中，加入 Assay Buffer，各孔体积见下表，如 B2 孔加入 130.4 μL Assay Buffer，B3-B11 孔，加入 110 μL Assay Buffer。

f) 吸取不同体积的待测样品母液，加入到第一个梯度稀释孔中（如 B2 中加入 1.45 μL Human IL-33），混匀。

	母液吸取	梯度稀释孔，依次从前孔吸取 22 μL ，加入次孔									对照组	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B	1.45 μL Human IL-33	加入	130.4 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	
C												
D												
E												
F												
G												
H												

- g) 从第一个梯度稀释孔 B2 中吸取 22 μL ，加入到第二个梯度稀释孔 B3，充分混匀。
 h) 以此类推，直至第 9 个梯度稀释孔（B10）。
 i) 将步骤 a 孵育过夜的孔板取出，每孔吸弃 100 μL 上清。
 j) 加入梯度稀释好的药物，100 μL 每孔。
 k) 盖上班盖，于 37°C CO₂ 培养箱中培养 16 h。
 l) 使用报告基因检测试剂盒，检测 Luciferase。

2) 报告基因检测

参考报告基因检测说明书。

H_IL33 Reporter 293 Cell Line (old version)	0 $\mu\text{g/mL}$	1.1 $\mu\text{g/mL}$	654.91 fg/mL
	557159	17295482	649738

3) 验证结果

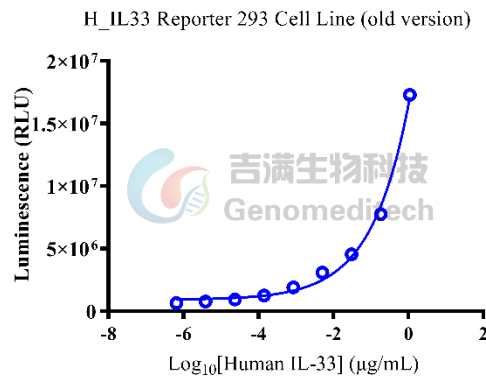


Fig 2. Response to Human IL33 ligand protein. H_IL33 Reporter 293 Cell Line(old version)(Cat. GM-C12812) at a concentration of 1.5E4 cells/well (96-well format) was stimulated with serial dilutions of Human IL-33 Protein

(R&D/3625-IL-010) in assay buffer (EMEM+1% FBS+1% P.S) for 16 hours. The firefly luciferase activity was measured using the Luciferase Reporter Assay Kit (Genomeditech). The maximum induction fold was approximately [31.0]. Data are shown by drug mass concentration.

2. Block 抗体抑制实验——Anti-IL33

操作步骤可调整优化，对于本实验，推荐 H_IL33 Reporter 293 Cell Line (old version) 细胞量为 1.5×10^4 cells/孔。本次实验使用 Human IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein (以下简称 Human IL-33) 作为激活药物 (激活浓度使用 30 ng/mL)，Anti-IL33 hIgG4 Antibody 作为 block 抗体 (150 kDa; 以下简称为 Anti-IL33)。Conc.01 终浓度为 50 $\mu\text{g/mL}$ ，3 倍梯度稀释，Conc.01-Conc.09 分别排布在 B2-B10，B11 为 0 浓度对照。周围孔加入 100 μL PBS，以防止边孔蒸发。

孔板排布如下：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS
B	Anti-IL33	50 $\mu\text{g/mL}$	16.67 $\mu\text{g/mL}$	5.56 $\mu\text{g/mL}$	1.85 $\mu\text{g/mL}$	617.28 ng/mL	205.76 ng/mL	68.59 ng/mL	22.86 ng/mL	7.62 ng/mL	0	PBS
C	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS
D												
E												
F												
G												
H												

1) 加样步骤

- 在实验前 16-24 h，将细胞从培养瓶中取出，消化离心收集细胞沉淀，使用适量完全培养基重悬细胞，检测细胞活力并计数，再以完全培养基调整细胞浓度为 1.5×10^5 cells/mL。以排枪加 100 μL 细胞/孔至中间孔。周围的孔加 100 μL PBS。盖上板盖，于孵箱中孵育过夜使用。
- 使用 1 个无菌 96 孔 V 底板准备药物稀释。
- 每个待测抗体，使用一行 (如 B2-B10)。
- 准备母液

药物名称	储液	母液	配置方法
Human IL-33	0.1 mg/mL	0.01 mg/mL	取 2 μL 储液 + 18 μL Assay Buffer

Anti-IL33	0.16 mg/mL	/	直接使用储液
-----------	------------	---	--------

- e) 96 孔 V 底板中，加入 Assay Buffer，各孔体积见下表，如 B2 孔加入 30.9 μ L Assay Buffer，B3-B11 孔，加入 55 μ L Assay Buffer。
- f) 吸取不同体积的待测样品母液，加入到第一个梯度稀释孔中（如 B2 中加入 51.5 μ L Anti-IL33），混匀。

母液吸取		梯度稀释孔，依次从前孔吸取 27.5 μ L，加入次孔										对照组	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A													
B	51.5 μ L Anti-IL33	加入	30.9 μ L	55 μ L	55 μ L	55 μ L	55 μ L	55 μ L	55 μ L	55 μ L	55 μ L	55 μ L	
C													
D													
E													
F													
G													
H													

- g) 从第一个梯度稀释孔 B2 中吸取 27.5 μ L，加入到第二个梯度稀释孔 B3，充分混匀。
- h) 以此类推，直至第 9 个梯度稀释孔（B10）。
- i) 配置激活药物 Human IL-33（ $2 \times$ 激活浓度），取 5 μ L 稀释后的母液，加入到 820.1 μ L Assay Buffer 中，混匀。将配置好的 Human IL-33 依次加入到步骤 h 梯度稀释的抗体中，B2-B11，每孔加入 55 μ L，盖上盖板，静置 1 h。
- j) 1 h 后，将步骤 a 孵育过夜的孔板取出，每孔吸弃 100 μ L 上清。加入步骤 i 准备好的混合药物，100 μ L 每孔。
- k) 盖板上板盖，于 37°C CO₂ 培养箱中培养 16 h。
- l) 使用报告基因检测试剂盒，检测 Luciferase。

2) 报告基因检测

参考报告基因检测说明书。

H_IL33 Reporter 293 Cell Line (old version)	Human IL-33+ 0 μ g/mL Anti-IL33	Human IL-33+50 μ g/mL Anti-IL33	Human IL-33+7.62 ng/mL Anti-IL33
	1507192	384284	1516400

3) 验证结果

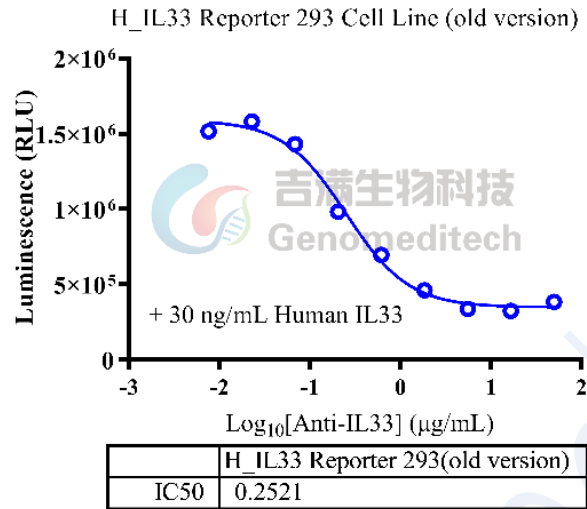


Fig 3. Response to Anti-IL33 hIgG4 Antibody (Itepekimab). Begin by preparing the H_IL33 Reporter 293 Cell Line (old version) (Cat. GM-C12812) at a density of 1.5E4 cells/well in a 96-well format. The serial dilutions of Anti-IL33 hIgG4 Antibody (Itepekimab) (Cat. GM-31628AB) were incubated with 30 ng/mL of Human IL33 (R&D/3625-IL-010) for 1 hour. After pre-incubation, the mixture was added to the H_IL33 Reporter 293 Cell Line and incubated for 16 hours in assay buffer (EMEM + 1% FBS + 1% P.S). Firefly luciferase activity is then measured using the Luciferase Reporter Assay Kit (Genomeditech).

附录 1：蛋白激活验证

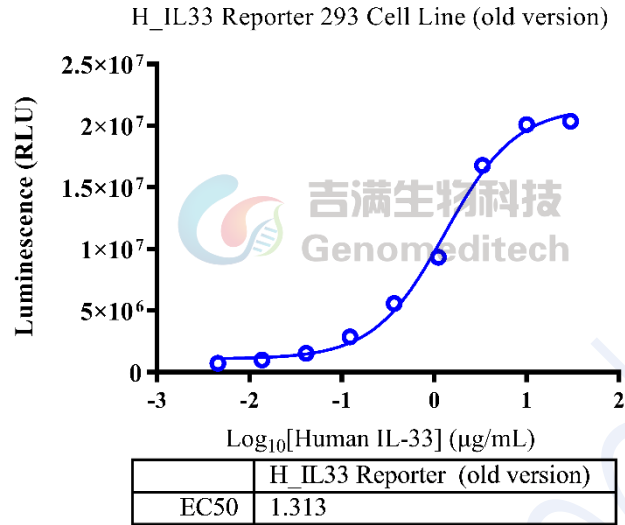


Fig 5. Response to Human IL-33 Protein; His Tag. H_IL33 Reporter 293 Cell Line (old version)(Cat. GM-C12812) at a concentration of 1.5E4 cells/well (96-well format) was stimulated with serial dilutions of Human IL-33 Protein; His Tag (Cat. GM-88001RP) in assay buffer (EMEM+1% FBS+1% P.S) for 16 hours. The firefly luciferase activity was measured using the Luciferase Reporter Assay Kit (Genomeditech). The maximum induction fold was approximately [32.7]. Data are shown by drug mass concentration.

附录 2：稳定性验证

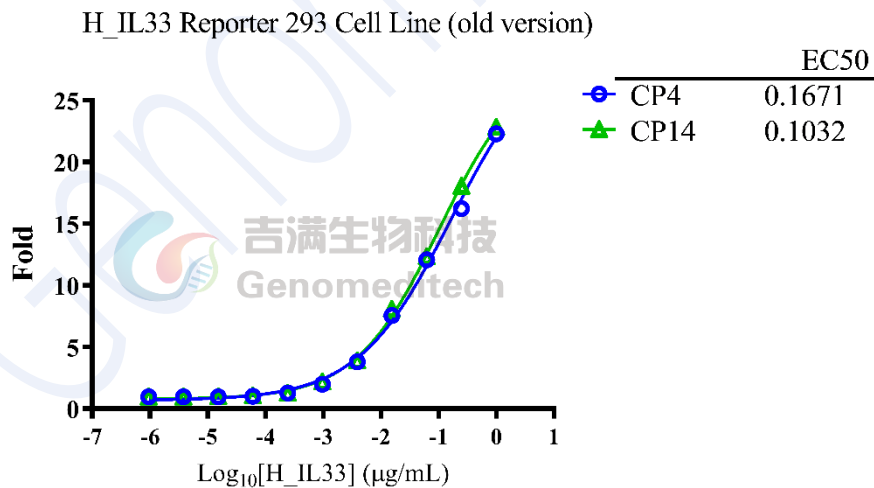


Fig 5. The passage stability of response to Human IL-33 ligand protein. The passage 4 and 14 of H_IL33 Reporter 293 Cell Line (old version) (Cat. GM-C12812) at a concentration of 1.5E4 cells/well (96-well format) was stimulated with serial dilutions of Human IL-33 Protein (R&D/3625-IL-010) in assay buffer (EMEM+1% FBS+1% P.S) for 16 hours. The firefly luciferase activity was measured using the Luciferase Reporter Assay Kit (Genomeditech). Data are shown by drug mass concentration.

相关产品

IL-33	
Anti-IL33 hIgG4 Antibody(Itepekimab)	Anti-IL33 hIgG4 Reference Antibody (Itepbio)

使用许可协议:

凡购买及使用本细胞系产品，即表明使用者自愿接受并遵守以下相关使用政策：

- 本细胞系产品限于科研用途，不得被利用于任何商业用途。
- 本产品严禁用于人类或动物疾病诊治，也不得直接用于人体相关实验。
- 用户及为其利益服务的第三方承包商仅在约定科研范围内使用本材料及其子代，不得进行修饰，亦不得向任何其他实体（包括关联机构）分发、销售、转让或以其他方式提供吉满生物材料。
- 如需将本产品用于本声明范围以外的用途，须事先获得吉满生物科技（上海）有限公司的书面许可，详情请联系吉满生物科技（上海）有限公司。